

## pCMV-N-Flag-BioID2 (邻近蛋白生物素标记质粒)

产品编号	产品名称	包装
D3021-1 $\mu$ g	pCMV-N-Flag-BioID2 (邻近蛋白生物素标记质粒)	1 $\mu$ g
D3021-100 $\mu$ g	pCMV-N-Flag-BioID2 (邻近蛋白生物素标记质粒)	100 $\mu$ g

### 产品简介:

- pCMV-N-Flag-BioID2 (邻近蛋白生物素标记质粒)是碧云天自行研发生产的一种用于在哺乳动物细胞中表达N端融合3X Flag 标签和BioID2的目的蛋白以用于生物素标记与其相互作用的目的蛋白的质粒。在ATP和生物素(Biotin)存在的条件下, BioID2融合蛋白根据其是否保留linker, 能对10nm或35nm半径内无论是直接相互作用的蛋白还是邻近的蛋白任意暴露在外的赖氨酸残基进行生物素标记, 后续可通过Streptavidin磁珠或凝胶从细胞裂解液中分离纯化生物素标记蛋白, 并通过质谱(Mass spectrometry, MS)鉴定相互作用的蛋白(图1)。邻近蛋白生物素标记质粒在筛选和鉴定生物体内的蛋白与蛋白相互作用和探索相关功能方面发挥着至关重要的作用[1-3]。

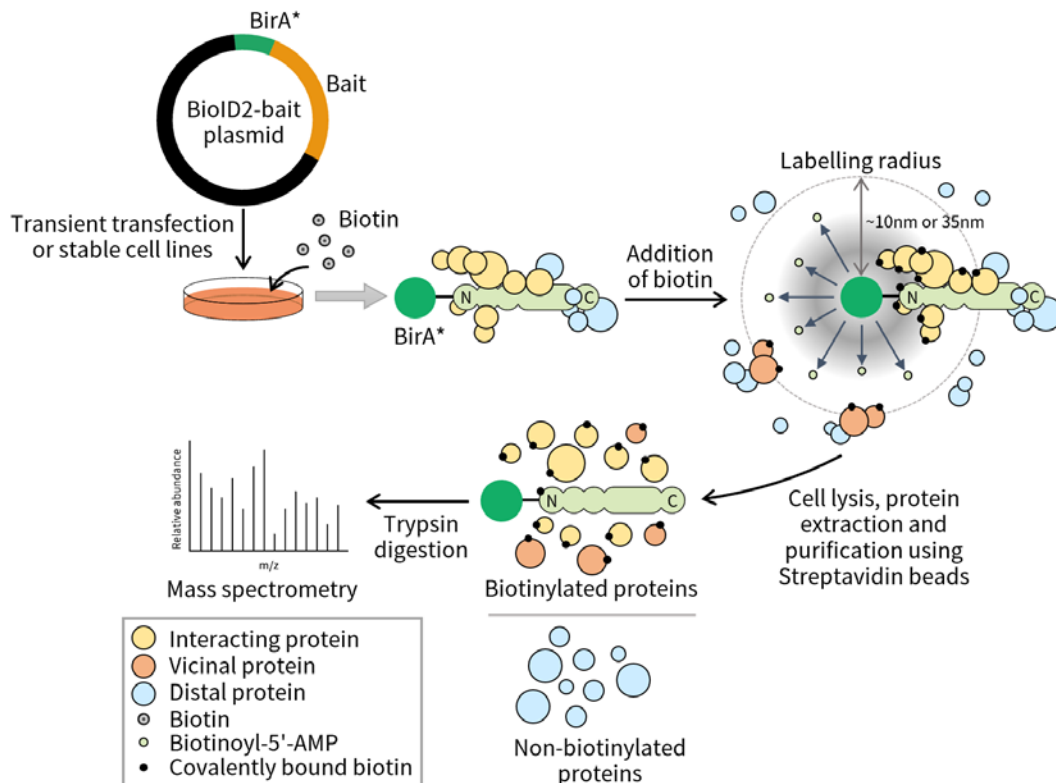


图1. 碧云天邻近蛋白生物素标记质粒的工作原理图。

- 邻近依赖的生物素标记鉴定(Proximity-dependent biotin identification, BioID)技术是基于来源于*E.coli*生物素连接酶(Biotin ligase, BirA)的R118G突变体BirA\*。BirA可在ATP存在的条件下, 高效活化生物素(D-Biotin)形成生物素酰-5'腺苷酸(Biotinoyl-5'-AMP), 并特异性地将生物素连接到Avi标签(GLNDIFEAQKIEWHE)的赖氨酸残基上, 从而对目的蛋白进行快捷、高效的生物素标记; 但由于来源于大肠杆菌的BirA\*发生R118G突变, 其活化的生物素酰-5'腺苷酸不再特异性修饰Avi标签的赖氨酸残基, 而是可以对与其邻近的(~10nm)任意暴露在外的蛋白赖氨酸残基进行生物素标记。
- **BioID具有如下优点:**
- ①**适用范围广:** BioID融合蛋白可以在大部分细胞中表达, 除了直接相互作用的蛋白, 一定范围内邻近的蛋白也会被生物素标记, 便于研究天然情况下目标蛋白与周围蛋白的相互作用; 适合空间和时间上细胞的动态过程的研究, 还可以提供动力学数据。
  - ②**灵敏度高:** BioID可以有效识别无法通过酵母双杂交(Yeast two hybrid, Y2H)或亲和纯化检测的体内蛋白与蛋白之间微弱、短暂的相互作用。
  - ③**克服溶解度难题:** BioID特别适合研究在酵母双杂交中可溶性差或较难纯化的蛋白。
  - ④**标记的蛋白易纯化、背景低:** 蛋白经BioID标记生物素后与Streptavidin磁珠或凝胶结合紧密, 可用强去垢剂(可耐受2% SDS)洗涤, 消除非特异性结合蛋白, 降低背景。
- **本产品中采用的BioID2是BioID的改进增强版本。** BioID2基于来源于*Aquifex aeolicus*生物素连接酶(BirA)的R40G突变体, 该突变体同样被称为BirA\*, 和大肠杆菌BirA的R118G突变体相似, 都可以对与其邻近的任意暴露在外的蛋白赖氨酸残基进行

生物素标记。BioID和BioID2都是邻近依赖的生物素标记鉴定技术，同时这两种技术分别使用的大肠杆菌来源的生物素连接酶突变体BirA(R118G)和嗜热菌*Aquifex aeolicus*来源的生物素连接酶突变体BirA(R40G)也被分别称为BioID和BioID2。

- **BioID2技术和BioID相比具有多方面的优点。**
  - ①**更灵活的生物素标记半径：**在质粒构建时可通过选择不同的酶切位点，在BioID2和诱饵蛋白之间调节是否表达linker (13X GGGGS repeats, ~25nm)控制邻近蛋白生物素标记的半径，不表达linker的BioID2融合蛋白生物素标记半径为~10nm，而表达linker的BioID2融合蛋白生物素标记半径为~35nm (图2)。这种生物素标记半径选择的灵活性，适合研究体积较大的蛋白和较大的蛋白复合物。
  - ②**更好的生物素标记效果：**BioID分子量约35kDa (7.8nm×3.0nm)，而BioID2分子量仅约24kDa (为3.8nm×3.0nm)，因此BioID2对融合蛋白功能的影响更小，空间位阻也更小，更容易接近被标记蛋白并产生更好的标记效果。
  - ③**更低的生物素浓度：**BioID需在生物素浓度高于50μM的条件下才能有效标记相互作用的蛋白质，而BioID2在3.2μM生物素的条件下就可以有效标记相互作用的蛋白。BioID2所需生物素用量更少，降低了生物素对细胞功能的潜在影响。
  - ④**更宽的反应温度范围：**BioID最佳反应温度为37℃，而BioID2在37℃-55℃都具有良好的生物素标记活性。


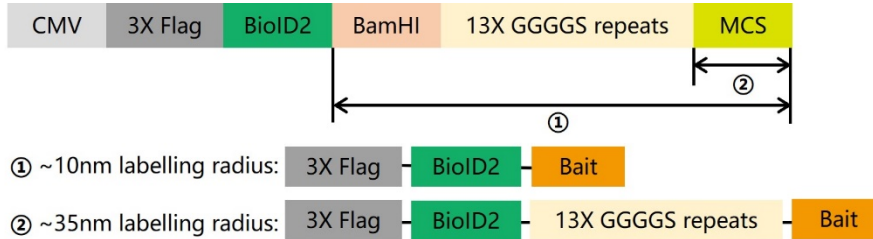


图2. 碧云天pCMV-N-Flag-BioID2质粒灵活的生物素标记半径原理图。①和②不同的酶切位点形成不同的生物素标记半径。

- 碧云天各种邻近蛋白生物素标记质粒的比较和选择，请参考 <https://www.beyotime.com/support/BioID.htm>
- 本质粒含有CMV启动子，可以高效启动目的蛋白在细胞中的表达；表达的融合蛋白带有3X Flag标签便于检测；带有氨苄青霉素(Ampicillin)抗性和新霉素(Neomycin)抗性，可利用其氨苄青霉素抗性转化大肠杆菌后筛选阳性菌；转染哺乳动物细胞后，可使用G418 (ST081)筛选稳定表达目的蛋白的细胞株，G418和新霉素效果一致，但G418的细胞毒性更低。
- pCMV-N-Flag-BioID2质粒的主要信息如下：

Feature	Nucleotide	Position
CMV promoter		235-818
3X Flag Tag		926-991
BioID2		998-1693
13X GGGGS repeats linker		1700-1897
Multiple Cloning Sites		1898-1939
BGH poly(A) signal		1959-2183
f1 ori		2229-2657
SV40 ori		2851-2986
Neomycin resistance gene		3067-3861
SV40 poly(A) signal		4035-4156
lac operator		4229-4245
CAP binding site		4298-4319
ori		4607-5192
Ampicillin resistance gene		5363-6223

- pCMV-N-Flag-BioID2质粒(6359bp)的图谱如下：

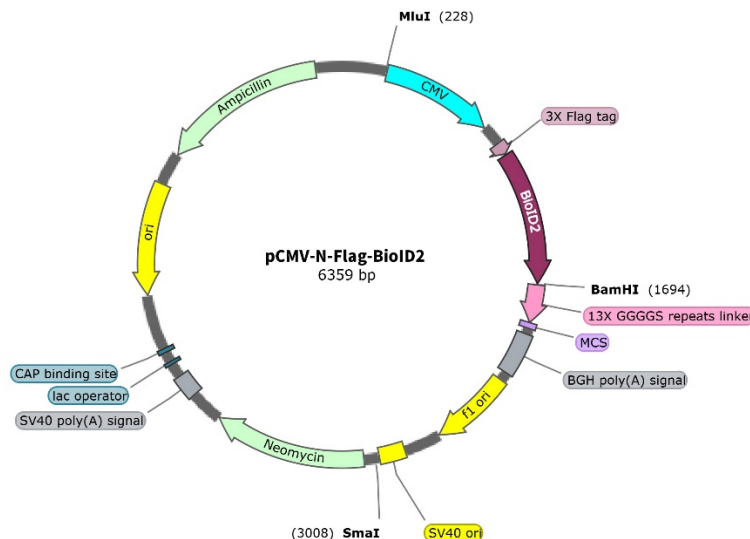

➤ pCMV-N-Flag-BioID2表达基因的详细图谱如下:

```

          HindIII          3X Flag Tag
901  GTTTAAACTT AAGCTTGCCA CCATGGACTA CAAGGACCAC GACGGCGACT
     CAAATTTGAA TTCGAACGGT GGTACCTGAT GTTCCTGGTG CTGCCGCTGA
                                           BioID2
951  ACAAGGACCA CGACATCGAC TACAAGGACG ACGACGACAA GGGCGGCTTC
     TGTTCCCTGGT GCTGTAGCTG ATGTTCCCTGC TGCTGCTGTT CCCGCCGAAG

1001 AAGAACCTGA TCTGGCTGAA GGAGGTGGAC AGCACCCAGG AGAGACTGAA
     TTCTTGGACT AGACCGACTT CCTCCACCTG TCGTGGGTCC TCTCTGACTT

1051 GGAGTGGAAC GTTAGCTACG GCACCGCCCT GGTGGCCGAC -----
     CCTCACCTTG CAATCGATGC CGTGGCGGGA CCACCGCTG -----

1601 CTGGTGGGCC TGAGCGAGAA GGGCGGCGCC CTGATCCTGA CCGAGGAGGG
     GACCACCCGG ACTCGCTCTT CCCGCCGCGG GACTAGGACT GGCTCCTCCC
                                           BamHI
1651 CATCAAGGAG ATCCTGAGCG GCGAGTTCAG CCGGAGGAGG AGCGGATCCG
     GTAGTTCCTC TAGGACTCGC CGCTCAAGTC GGACTCTTCT TCGCCTAGGC
13X GGGGS Repeats linker
1701 GTGGAGGCGG GTCTGGAGGC GGGGGTAGTG GCGGGGGTGG AAGCGGGGGT
     CACCTCCGCC CAGACCTCCG CCCCATCAC CGCCCCACC TTCGCCCCCA

1751 GGAGGCGGGT CGGGTGGCGG AGGTAGCGGA GGCGGTGGAA GTGGAGGCGG
     CCTCCGCCCA GCCCACCGCC TCCATCGCCT CCGCCACCTT CACCTCCGCC

1801 TGGAAGTGGT GGAGGAGGTT CTGGTGGCGG AGGTAGCGGT GGCGGAGGTA
     ACCTTCACCA CCTCTCCAA GACCACCGCC TCCATCGCCA CCGCCTCCAT
                                           KpnI
1851 GCGGAGGCGG TGGAAGTGGT GGCGGAGGTA GCGGAGGCGG TGGATCGGGT
     CGCTCCGCC ACCTTCACCA CGCCTCCAT CGCTCCGCC ACCTAGCCCA
     EcoRV EcoRI XhoI XbaI
1901 ACCGATATCG AATTCCTCGA GTCTAGAGGG CCGTTTAAA CCCGCTGATC
     TGGCTATAGC TTAAGGAGCT CAGATCTCCC GGGCAAATTT GGGCGACTAG
     BGH poly(A) signal
1951 AGCCTCGACT GTGCCTTCTA GTTGCCAGCC ATCTGTTGTT TGCCCCCTCC
     TCGGAGCTGA CACGGAAGAT CAACGGTCGG TAGACAACAA ACGGGGAGGG

```

➤ pCMV-N-Flag-BioID2中没有的酶切位点包括:

AarI	AbsI	AccIII	AccB7I	AcvI	AfeI	AgeI
AjuI	AleI	Aor13HI	Aor51HI	AscI	AsiGI	AsiSI
AxyI	BaeI	BanIII	BbrPI	BbvCI	BoxI	Bsa29I
Bse21I	BseAI	BseCI	BsgI	BshVI	BshTI	BsiWI
BsmBI	Bsp13I	Bsp1407I	BspDI	BspEI	BspXI	BsrGI
BstAUI	BstEII	BstHPI	BstPI	BstPAI	BstXI	Bsu15I
Bsu36I	BsuTUI	CciNI	Cfr42I	ClaI	CspAI	Eco47III
Eco72I	Eco81I	Eco91I	EcoO65I	Esp3I	FseI	FspAI
HpaI	I-CeuI	I-PpoI	I-SceI	KflI	Kpn2I	KspI
KspAI	MauBI	MreI	MroI	Nb.BbvCI	NotI	Nt.BbvCI
OliI	PacI	PalAI	PasI	Pfl123II	PflMI	PI-PspI
PI-SceI	PinAI	PmaCI	PmlI	PpuMI	PshAI	Psp5II
PspCI	PspEI	PspLI	PspPPI	RgaI	RigI	SacII
SanDI	SbfI	SdaI	SfaAI	SfiI	Sfr303I	SgfI
SgrAI	SgrBI	SgsI	SmiI	SrfI	Sse8387I	SspBI
SstII	SwaI	TstI	Van91I	XcmI		

➤ pCMV-N-Flag-BioID2中的单酶切位点包括:

Acc65I	AflII	AhdI	ApaI	AvrII	BamHI	BbsI
BmgBI	BmtI	BsaBI	BsmI	BssHII	BstBI	BstZ17I
DraIII	EagI	Eco53kI	EcoRI	EcoRV	HindIII	KpnI
MluI	MscI	NdeI	NheI	NruI	Paer7I	PciI
PspOMI	PspXI	PvuI	RsrII	SacI	ScaI	SexAI
SmaI	SnaBI	SpeI	SspI	StuI	TspMI	Tth111I
XhoI	XmaI					

➤ pCMV-N-Flag-BioID2质粒中推荐的测序引物序列如下:

CMV-F (769-789): 5'-CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG-3'  
 BGH-R (1970-1953): 5'-TAGAAGGCACAGTCGAGG-3'

➤ pCMV-N-Flag-BioID2的全序列信息请参考碧云天网站上该质粒的信息。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
D3021-1μg	pCMV-N-Flag-BioID2	1μg
D3021-100μg	pCMV-N-Flag-BioID2	100μg
—	说明书	1份

### 保存条件:

-20°C保存。

### 注意事项:

- 本质粒未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途，也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明:

- 首次使用1μg包装的本产品时，请先取少量本质粒转化大肠杆菌，进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定，或通过测序进行鉴定。
- 100μg包装的本产品质粒浓度为0.25μg/μl，共400μl。可以直接用于酶切或者转染细胞。
- 质粒构建。**

- 如果在多克隆位点(Multiple cloning sites, MCS)中选择1个限制性内切酶切位点和BamHI (GGATCC)限制性内切酶切位点，双酶切插入诱饵蛋白(Bait)的基因片段，则表达的融合有3X Flag-BioID2的诱饵蛋白生物素标记半径为~10nm。
- 如果在多克隆位点(Multiple cloning sites, MCS)中选择1或2个限制性内切酶位点插入诱饵蛋白的基因片段，则表达的3X Flag-BioID2和诱饵蛋白之间因有linker (13X GGGGS repeats, ~25nm)连接，诱饵蛋白生物素标记半径为~35nm。

**注:** 克隆时须保持BioID2与诱饵蛋白的碱基序列在同一阅读框中，避免因移码突变导致的诱饵蛋白不表达。

- 检测诱饵蛋白表达、细胞定位和活性。**

为获得最理想的实验效果，需选择适合的细胞类型用于3X Flag-BioID2融合诱饵蛋白的适度表达，3X Flag-BioID2融合诱饵蛋白的过量表达会导致假阳性的出现，因此在大规模表达3X Flag-BioID2融合诱饵蛋白用于蛋白与蛋白相互作用鉴定时，建议少量转染细胞通过免疫荧光(Immunofluorescence)和蛋白质免疫印迹法(Immunoblot)评估、优化3X Flag-BioID2融合诱饵蛋白的表达、定位和活性(图3)。

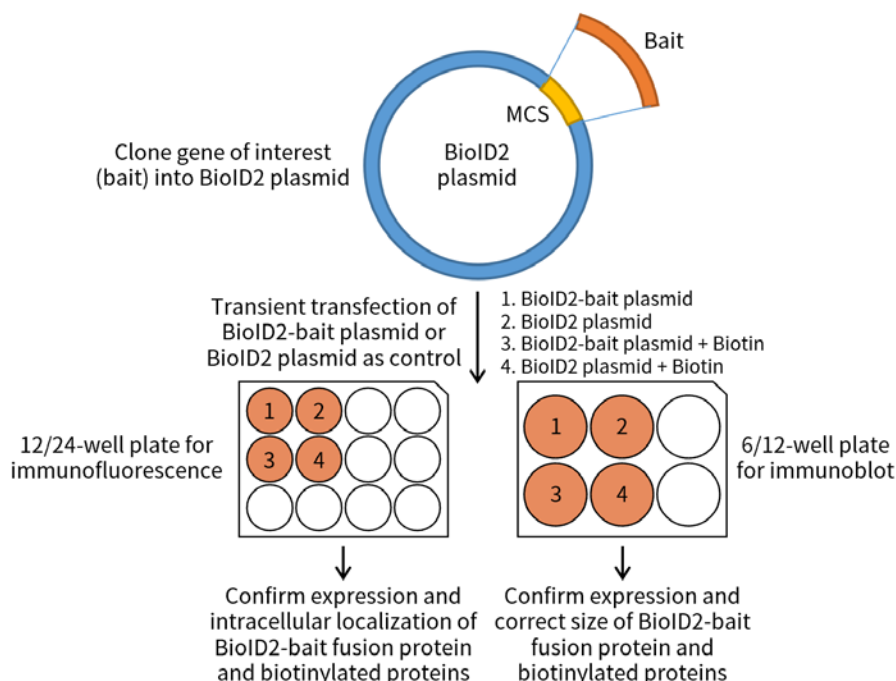


图3. 碧云天pCMV-N-Flag-BioID2质粒推荐的使用流程图。

- 在转染前一天将适量细胞(具体的细胞数量根据细胞类型、大小和细胞生长速度等确定)分别接种到12孔板(用于Immunofluorescence)和6孔板(用于Immunoblot)内进行培养，使第二天细胞密度能达到约70-80%。
- 使用合适的转染试剂例如Lipo8000™或Lipo6000™分别将克隆有诱饵蛋白质粒(pCMV-N-Flag-BioID2-Bait)或阴性对照质粒(pCMV-BioID2-Flag) (D3025)转染到细胞中。
- 在转染3-4小时后补充加入终浓度为3.2μM的生物素(图3, 3、4孔)或不补充加入生物素(图3, 1、2孔)，继续培养18-24小时。

**注：**一般情况下，终浓度为3.2μM的生物素就可以有效标记相互作用的蛋白，但还是建议在1-50μM范围内设置梯度，以寻找最适合的生物素使用浓度。

- d. 免疫荧光(Immunofluorescence)检测融合有3X Flag-BioID2的诱饵蛋白和被生物素标记的蛋白。
- (a) 去除12孔板中的培养液，加入1-2ml冰浴预冷的PBS (C0221A)，洗涤细胞，去除PBS，尽量确保没有液体残留。
- (b) 加入0.5ml免疫染色固定液(P0098)或4%多聚甲醛固定液(P0099)，固定细胞10分钟或更长时间(可4°C固定过夜)。
- 注：**也可以根据特定的一抗或样品采用有效成分为乙醇、甲醇或其它类型的固定液。
- (c) 去除固定液，用免疫染色洗涤液(P0106)或TBSTx (ST675)洗涤3次，每次3-5分钟。洗涤时宜用摇床，或手动晃动数次。去除洗涤液，尽量确保没有液体残留。
- (d) 用免疫染色封闭液(P0102/P0260)或含5% BSA的TBSTx溶液封闭60分钟，请置于摇床上轻轻摇动。
- (e) 去除封闭液，选用合适的一抗对融合有3X Flag-BioID2的诱饵蛋白进行免疫荧光染色，孵育60分钟或在摇床上轻轻摇动孵育60分钟，为增强与一抗的结合，可以在4°C孵育过夜。可同时使用DAPI染色液(C1005)或Hoechst (C1011/C1017/C1018)对细胞核染色，荧光探针标记的Streptavidin可以对生物素标记的蛋白进行荧光染色。
- 注：**推荐使用免疫染色一抗稀释液(P0103/P0262)或5% BSA的TBSTx溶液作为一抗稀释液。
- (f) 去除一抗，用免疫染色洗涤液(P0106)或TBSTx (ST675)洗涤3-5次，每次3-5分钟。洗涤时宜用摇床，或手动晃动数次。
- (g) 去除洗涤液，选用合适的荧光标记的二抗避光孵育60分钟或在摇床上轻轻摇动孵育60分钟。
- 注：**推荐使用免疫荧光染色二抗稀释液(P0108/P0265)或5% BSA的TBSTx溶液作为二抗稀释液。
- (h) 用洗涤液洗涤3-5次，每次3-5分钟，期间注意避光。每次洗涤时都可以在摇床上轻轻摇动。
- (i) 使用荧光显微镜或激光共聚焦显微镜观察3X Flag-BioID2融合诱饵蛋白的表达、定位以及被生物素标记的蛋白。
- e. 免疫印迹法(Immunoblot) 检测融合有3X Flag-BioID2的诱饵蛋白和被生物素标记的蛋白。
- 6孔板用于通过免疫印迹法检测3X Flag-BioID2融合诱饵蛋白的表达和被生物素标记的蛋白。具体实验操作方法可参照碧云天网站的Western实验步骤：<https://www.beyotime.com/support/western.htm>

#### 5. 3X Flag-BioID2融合诱饵蛋白相互作用的蛋白质的生物素标记与鉴定。

可以使用稳定表达3X Flag-BioID2融合诱饵蛋白和阴性对照(表达BioID2-Flag)的稳转细胞株，但是为了避免假阳性的出现，需保证3X Flag-BioID2融合诱饵蛋白的适度表达，或采用瞬时转染质粒的方式。后续通过Streptavidin磁珠(ST675)或凝胶从细胞裂解液中分离纯化生物素标记蛋白，用于质谱鉴定生物素标记蛋白。所需要使用的细胞量，需根据被生物素标记蛋白在所使用细胞中的表达量和被生物素标记的效率进行调整。此处以2个10cm细胞培养皿的稳转细胞株为例进行说明。

- a. 生物素标记。
- (a) 分别将适量的稳定表达3X Flag-BioID2融合诱饵蛋白和阴性对照(表达BioID2-Flag)的细胞(具体的细胞数量据细胞类型、大小和细胞生长速度等而定)接种到2个10cm细胞培养皿内进行培养，使第二天细胞密度能达到约70-80%。
- (b) 18-24小时后，吸尽培养液，更换为含有3.2μM生物素的完全培养液，继续培养24小时。
- 注：**加入生物素的终浓度和后培养时间可根据实验目的进行调整。
- (c) 去除培养液，用预冷的PBS洗涤细胞2次，去除PBS，尽量确保没有液体残留。
- b. 细胞裂解。
- (a) 选择合适的裂解液，用于制备细胞裂解液。推荐使用Western及IP细胞裂解液用于细胞(P0013)。如有必要，也可以使用RIPA裂解液(P0013B/P0013C/P0013D)用于样品的制备。如果使用自行配制的裂解液，需要确保裂解液的pH为6-8。
- (b) 具体的细胞裂解液的制备步骤请参考相应裂解液的使用说明。制备好的裂解液上清置于冰上或4°C存放，随后即可用于免疫沉淀。新鲜制备好的样品，建议尽量当天完成免疫沉淀等后续操作，但如果样品不能当天使用，也可以适当分装后-80°C冻存。
- c. 免疫沉淀(Pull Down)生物素标记蛋白。
- 推荐使用BeyoMag™ Streptavidin Magnetic Beads (链霉亲和素磁珠) (P2151)，具体的免疫沉淀步骤请参考链霉亲和素磁珠的使用说明。
- d. 质谱(Mass Spectrometry)鉴定。
- 样品SDS-PAGE电泳后对凝胶进行考染或银染，切割感兴趣的条带进行质谱检测；也可以通过二维电泳后寻找差异点进行质谱分析；或者直接进行基于质谱的蛋白质组分析。

#### 参考文献：

1. Renata V, Stuart A M. Proteomics. 2016. 16: 2503-2518.
2. Valerie LS, Alessandro C, Andrew JM. Cell Biology. 2016. 73:17.19.1-17.19.12.
3. Kim DI, Jensen SC, Noble KA, Kc B, Roux KH, et al. Mol Biol Cell. 2016. 27(8):1188-96.

#### 相关产品：

产品编号	产品名称	包装
D3021-1μg	pCMV-N-Flag-BioID2 (邻近蛋白生物素标记质粒)	1μg
D3021-100μg	pCMV-N-Flag-BioID2 (邻近蛋白生物素标记质粒)	100μg
D3023-1μg	pCMV-C-BioID2-Flag (邻近蛋白生物素标记质粒)	1μg

D3023-100µg	pCMV-C-BioID2-Flag (邻近蛋白生物素标记质粒)	100µg
D3025-1µg	pCMV-BioID2-Flag (阴性对照质粒)	1µg
D3025-100µg	pCMV-BioID2-Flag (阴性对照质粒)	100µg
D3027-1µg	pCMV-N-Flag-AirID (邻近蛋白生物素标记质粒)	1µg
D3027-100µg	pCMV-N-Flag-AirID (邻近蛋白生物素标记质粒)	100µg
D3029-1µg	pCMV-C-AirID-Flag (邻近蛋白生物素标记质粒)	1µg
D3029-100µg	pCMV-C-AirID-Flag (邻近蛋白生物素标记质粒)	100µg
D3030-1µg	pCMV-AirID-Flag (阴性对照质粒)	1µg
D3030-100µg	pCMV-AirID-Flag (阴性对照质粒)	100µg
D3034-1µg	pCMV-N-Flag-miniTurboID (邻近蛋白生物素标记质粒)	1µg
D3034-100µg	pCMV-N-Flag-miniTurboID (邻近蛋白生物素标记质粒)	100µg
D3035-1µg	pCMV-C-miniTurboID-Flag (邻近蛋白生物素标记质粒)	1µg
D3035-100µg	pCMV-C-miniTurboID-Flag (邻近蛋白生物素标记质粒)	100µg
D3037-1µg	pCMV-miniTurboID-Flag (阴性对照质粒)	1µg
D3037-100µg	pCMV-miniTurboID-Flag (阴性对照质粒)	100µg
D3039-1µg	pCMV-λN-NES-miniTurbo-Flag (RaPID质粒)	1µg
D3039-100µg	pCMV-λN-NES-miniTurbo-Flag (RaPID质粒)	100µg
D3040-1µg	pCMV-EGFP-BoxB-RNAmotif-BoxB (RaPID质粒)	1µg
D3040-100µg	pCMV-EGFP-BoxB-RNAmotif-BoxB (RaPID质粒)	100µg
D3042-1µg	pCMV-EGFP-BoxB-EDEN15-BoxB (RaPID阳性对照质粒)	1µg
D3042-100µg	pCMV-EGFP-BoxB-EDEN15-BoxB (RaPID阳性对照质粒)	100µg
D3044-1µg	pCMV-N-NES-Flag-APEX2 (邻近蛋白生物素标记质粒)	1µg
D3044-100µg	pCMV-N-NES-Flag-APEX2 (邻近蛋白生物素标记质粒)	100µg
D3047-1µg	pCMV-N-mito-Flag-APEX2 (线粒体邻近蛋白生物素标记质粒)	1µg
D3047-100µg	pCMV-N-mito-Flag-APEX2 (线粒体邻近蛋白生物素标记质粒)	100µg
P2151-200µl	BeyoMag™ Streptavidin Magnetic Beads (链霉亲和素磁珠)	200µl
P2151-1ml	BeyoMag™ Streptavidin Magnetic Beads (链霉亲和素磁珠)	1ml
P2151-5ml	BeyoMag™ Streptavidin Magnetic Beads (链霉亲和素磁珠)	5ml

Version 2022.10.08