

## Control Knockout HEK293T RIPA Lysate

| 产品编号   | 产品名称                                 | 包装    |
|--------|--------------------------------------|-------|
| L00025 | Control Knockout HEK293T RIPA Lysate | 100μg |

### 产品简介:

- Control Knockout HEK293T RIPA Lysate (无任何靶向基因敲除HEK293T细胞RIPA裂解液)是通过同时表达Cas9、目的基因sgRNA和puromycin抗性基因并实现了目的基因CRISPR敲除的多克隆HEK293T细胞的对照RIPA裂解液。本对照裂解液中不含sgRNA。本裂解液或GFP Knockout HEK293T RIPA Lysate (L00027)是CRISPR/Cas9技术敲除目的基因的常用对照裂解液。
- 本RIPA裂解液源于可同时表达Cas9和puromycin抗性基因的慢病毒感染HEK293T细胞并经过puromycin筛选后获得的多克隆细胞。制备该细胞的相应慢病毒的基因序列的关键图谱信息请参考图1。

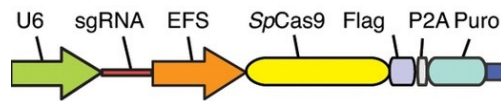


图1. 可同时表达sgRNA、Cas9和puromycin抗性的慢病毒其基因序列的关键图谱信息。注: 本对照裂解液中无sgRNA。

- 碧云天同时提供基于CRISPR/Cas9技术的Control基因敲除的质粒(L00011 pLenti-Control-sgRNA)、慢病毒(L00015 Control Knockout Lentivirus)、HEK293T细胞(L00020 Control Knockout HEK293T Cells)、HEK293T敲除细胞的RIPA裂解液(L00025 Control Knockout HEK293T RIPA Lysate)、HEK293T敲除细胞的Trizol裂解液(L00031 Control Knockout HEK293T Trizol Lysate)等产品, 具体请在碧云天网站查询或在本产品网页点击相应产品。
- 用于制备本产品的RIPA裂解液为碧云天生产的P0013B RIPA裂解液(强), 其具体组分请查阅产品网页或说明书。

### 包装清单:

| 产品编号   | 产品名称                                 | 包装    |
|--------|--------------------------------------|-------|
| L00025 | Control Knockout HEK293T RIPA Lysate | 100μg |
| —      | 说明书                                  | 1份    |

### 保存条件:

-20°C保存, 3个月有效; -80°C保存, 至少一年有效。

### 注意事项:

- 碧云天拥有sgRNA序列的知识产权, 如果需要sgRNA序列, 请在订购后发送邮件向info@beyotime.com索取。sgRNA序列信息与本产品, 未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途, 也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。使用者在发表研究论文或结果时, 应注明来源。
- 对于非目录产品的CRISPR基因敲除细胞RIPA裂解液的定制, 可联系碧云天技术服务service@beyotime.com。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明:

#### 1. 细胞RIPA裂解液样品的蛋白浓度测定:

推荐使用碧云天生产的BCA蛋白浓度测定试剂盒(P0009/P0010/P0010S/P0011/P0012/P0012S)测定蛋白浓度。由于本产品含有较高浓度的去垢剂, 不建议使用Bradford法测定本产品的蛋白浓度。RIPA裂解液的使用说明请参考:  
<https://www.beyotime.com/product/P0013B.htm>。

#### 2. 细胞RIPA裂解液的使用:

本RIPA裂解液测定浓度后加入SDS-PAGE蛋白上样缓冲液即可用于SDS-PAGE、Western检测、以及目的基因抗体的验证等。

### 相关产品:

| 产品编号   | 产品名称                                 | 包装    |
|--------|--------------------------------------|-------|
| L00025 | Control Knockout HEK293T RIPA Lysate | 100μg |
| L00027 | GFP Knockout HEK293T RIPA Lysate     | 100μg |
| P0009  | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)                    | 5000次 |

|          |                               |           |
|----------|-------------------------------|-----------|
| P0010    | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)             | 500次      |
| P0010S   | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)             | 200次      |
| P0011    | BCA蛋白浓度测定试剂盒                  | 5000次     |
| P0012    | BCA蛋白浓度测定试剂盒                  | 500次      |
| P0012S   | BCA蛋白浓度测定试剂盒                  | 200次      |
| P0012A   | SDS-PAGE凝胶配制试剂盒               | 可制30-50块胶 |
| P0012AC  | SDS-PAGE凝胶快速配制试剂盒             | 可制30-50块胶 |
| P0013B   | RIPA裂解液(强)                    | 100ml     |
| P0014A/B | SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, Powder) | 1/10L     |
| P0014C/D | SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 10X)    | 100/500ml |
| P0015    | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)           | 2ml       |
| P0015L   | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)           | 15ml      |
| P0015B   | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(2X)           | 5ml       |
| P0015F   | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(6X)           | 2ml       |

Version 2021.11.02